



BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

DAFTAR ISI

Prakata	2
Manfaat	3
Titik Nei Guan	4
Titik Ling Dao	4
Titik Arteri Radial	4
Titik Tong Li	4
Bagian-Bagian Produk	5
Pengoperasian Aculaser GNIOO	6
Iradiasi Arteri Pergelangan Tangan	6
Petunjuk Pengisian Baterai	7
Peringatan	8
Cara Perawatan	8
Spesifikasi Teknis	9

PRAKATA

Terima kasih telah memilih Aculaser Gnioo

Aculaser Gnioo merupakan sebuah alat terapi yang aman, tanpa rasa sakit, efektif, dan mudah digunakan. Dengan efek pemulihan yang luar biasa dan dapat digunakan di mana pun, di rumah, di kantor maupun saat berpergian.

Pengujian klinis telah membuktikan efek terapi sinar laser dapat mencegah dan membantu pemulihan penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Selain itu, terapi laser juga dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit non-virus serta meningkatkan kecantikan dan kebugaran melalui perbaikan kualitas darah yang akan memudahkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh.

Aculaser Gnioo diproduksi dengan standar kualitas dan telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan serta telah terdaftar dan memiliki Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor AKL

Mohon pelajari buku petunjuk pemakaian ini dan ikuti instruksi pemakaiannya. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun mengalami kesulitan yang berhubungan dengan produk, Anda dapat menghubungi Layanan Konsumen kami yang senantiasa melayani Anda.



Manfaat Aculaser GNIOO

Adapun beberapa manfaat dari Aculaser GNIOO adalah:

- Membantu proses pemulihan penyakit vaskular seperti Cardiovascular (Penyakit Jantung) dan Cerebrovaskular (Stroke)
- Membantu mengurangi kekentalan darah
- Membantu menguraikan gumpalan darah
- Membantu mengurangi kadar gula berlebih dalam darah
- Membantu mengatasi hipertensi dan kolesterol berlebih
- Membantu meningkatkan kualitas tidur
- Membantu meningkatkan imunitas tubuh


TITIK NEI GUAN (PC-6)

Titik Nei Guan biasa dikenal dengan istilah “Inner Gate” merupakan titik meridian Pericardium ke enam. Titik Nei Guan merupakan titik istimewa karena menguasai area sekitar lambung dan dada.

Titik Nei Guan bermanfaat untuk membantu memaksimalkan kinerja jantung, mengurangi nyeri dada, mengatasi jantung berdebar-debar, rasa sesak di dada, insomnia, gangguan pencernaan (seperti mual, muntah, cegukan).

TITIK ARTERI RADIAL

Titik Arteri Radial bermanfaat untuk memperbaiki kualitas darah melalui peningkatan aktivitas mitokondria dalam sel untuk menghasilkan energi bagi tubuh dan menurunkan kadar gula serta kolesterol berlebih dalam darah, mengurangi kekentalan darah dengan menghambat agregasi trombosit, menguraikan gumpalan darah dengan mengaktifkan fibrinolisis, meningkatkan hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih berkualitas, merangsang imunoglobulin guna meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh, merangsang tubuh mengeluarkan Nitric Oxide yang dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah.

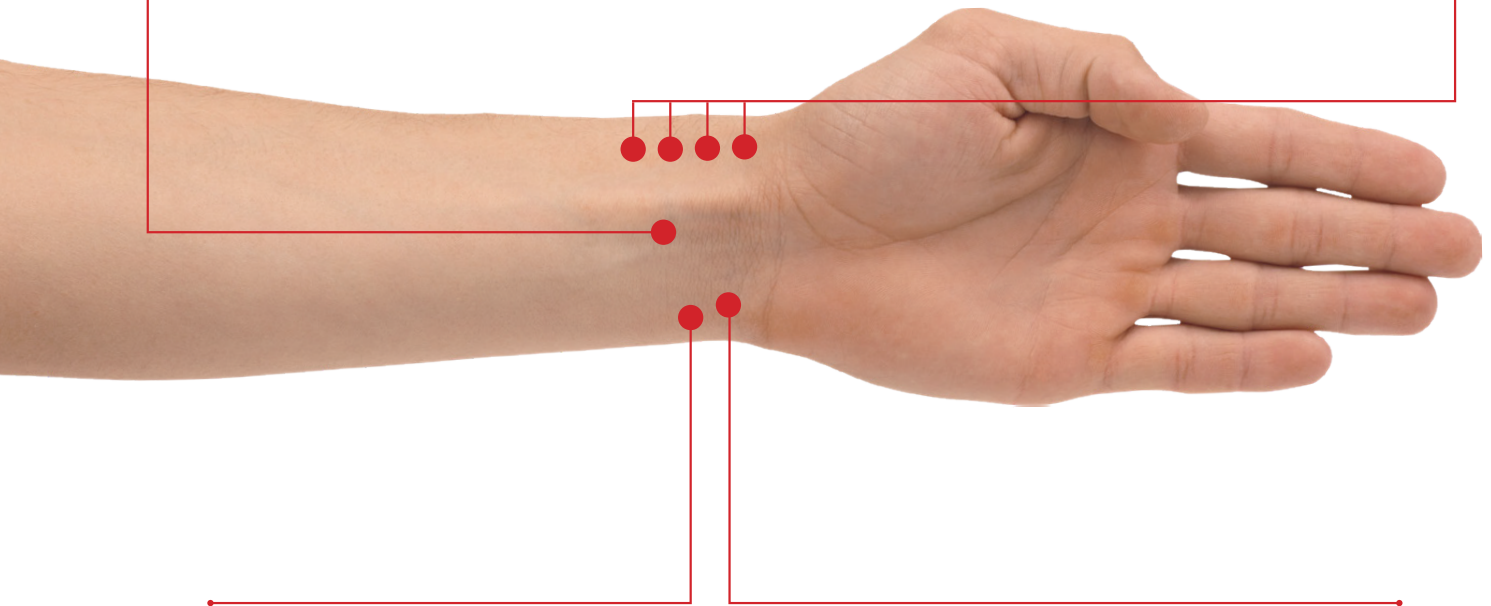

TITIK LING DAO (HT 4)

Titik Ling Dao bermanfaat untuk mengatasi nyeri dada, mengurangi nyeri otot di lengan & tangan dan menstabilkan kondisi mental (seperti manik, depresi, stress).

TITIK TONG LI (HT 5)

Titik Tong Li bermanfaat untuk menstabilkan irama jantung, menjaga kesehatan mental, membantu mengatasi gangguan bicara dan meredakan nyeri di lengan & tangan.

BAGIAN-BAGIAN PRODUK



Lubang
Pengisi Daya



Kabel
Pengisi Daya

Pengisi Daya

PETUNJUK PENGOPERASIAN ACULASER GNIOO

Letak Tombol Operasional



On/Off dan
Pilih Durasi Terapi

IRADIASI ARTERI PERGELANGAN TANGAN

1. Pastikan Aculaser Gnioo dipakai pada lokasi tepat di garis pergelangan tangan kiri bagian bawah sebelum menyalakan laser.
2. Tekan tombol Power  selama 5 detik untuk menyalakan Aculaser Gnioo
3. Arahkan pilihan pada durasi terapi yang diinginkan dengan menekan tombol Power  kembali, kemudian tunggu selama 3 detik laser menyala secara otomatis
4. Aculaser Gnioo akan mati secara otomatis apabila tidak digunakan, untuk mematikan secara manual tekan tombol Power  selama 5 detik

DURASI TERAPI

- 15 Menit
- 30 Menit
- 60 Menit

PETUNJUK PENGISIAN BATERAI



Lubang
Pengisi Daya

1. Pastikan laser unit tidak dalam kondisi menyala (off)
 2. Segera lakukan “charging” / LED tombol power berkedip berwarna merah
 3. Hentikan pengisian daya ketika baterai telah terisi penuh / LED tombol power berwarna hijau
 4. Guna mempertahankan kinerja baterai, disarankan untuk tidak menghentikan pengisian daya sebelum baterai terisi penuh
 5. Guna mempertahankan kinerja baterai, disarankan untuk tidak menggunakan perangkat hingga baterai benar-benar habis
 6. Tidak disarankan untuk melakukan terapi bersamaan dengan pengisian daya berlangsung
- Simpan unit pada suhu ruang 22-25 °C

EFEK SAMPING

Umumnya anda tidak akan merasakan efek samping. Sebagai efek awal dari terapi sinar laser, Anda mungkin akan merasa lebih berenergi yang disebabkan oleh stimulasi pada sistem otonom simpatis dan parasimpatis yang membuat tidur anda lebih berkualitas dan relaks.

TIDAK DISARANKAN DIGUNAKAN PADA

1. Masa kehamilan
2. Pengguna alat pacu jantung
3. Penderita kanker
4. Penderita gangguan pembekuan darah (hemofilia)
5. Sedang mengalami pendarahan, pasca operasi

CARA PERAWATAN

1. Dilarang keras melakukan perbaikan, modifikasi & pembongkaran selain dilakukan oleh service center Gogomall
2. Jauhkan dari tempat basah, area bersuhu tinggi & cahaya matahari langsung
3. Jauhkan dari peralatan microwave (gelombang mikro)
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
5. Gunakan kain halus yang telah diberikan cairan alkohol untuk membersihkan permukaan unit produk yang kotor
6. Hindari produk dari resiko terjatuh atau tertumpuk barang

SPESIFIKASI TEKNIS


ITEM	DESKRIPSI
650nm Laser	7pcs
Daya Laser Keluar (Output)	DC5.0V
Suhu Lingkungan	5°C ~ 40°C
Kelembaban Relatif	≤80%
Tekanan Atmosferik	860hpa - 1060hpa
Voltase Baterai	DC 3.7 ~ 4.2V
Kapasitas Baterai	1800mAh

Kunjungi situs kami: <http://gogomall.co.id/activation> untuk melakukan pendaftaran garansi dan menikmati keuntungan tambahan atau pindai kode QR untuk mendaftar langsung di halaman registrasi garansi.



CUSTOMER SERVICE
021-50234200

Jl. Jalur Sutera Utama, Kav. Spectra 23c No. 8-9
Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten 15325

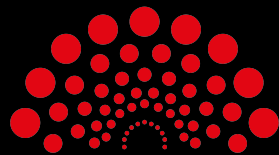

ACULASER

gnioo